

Klin odwodzący SYSTAM



Klin odwodzący SYSTAM

- Wykonany z piany wysokoelastycznej.
- Anatomiczny kształt klina idealnie dopasowuje się do kształtu kończyn dolnych.
- Nadaje się do stosowania w pozycji siedzącej, leżącej oraz w pozycji bocznej.
- Odpowiednia wysokość klina.

PRODUKTY DO POZYCJONOWANIA PACJENTA

P911L - KLIN ODWODZĄCY

Wykonane z piany viskoelastycznej z efektem pamięci.

MATERIAŁY

40
kg/m³



Piana HR
Wysokoelastyczna



Zdejmowany
pokrowiec
Polymall®



NF EN ISO 597 - 1 & 2

KONSERWACJA MATERACA:



KONSERWACJA POKROWCA:



PRZEZNACZENIE

- Chroni miednicę po operacjach.
- Zapobiega rotacji.
- Pomaga w stabilizacji kończyn dolnych.
- Utrzymuje kończyny w odwiedzeniu.

Klin bez pokrowca



Klin z pokrowcem

POKROWIEC Z BI-ELASTYCZNEGO MATERIAŁU

- redukuje tarcie,
- odporny na przetarcia,
- miękki i miły w dotyku,
- odprowadza wilgoć,
- nieprzemakalny,
- można prać w temp. 90 stopni i dezynfekować środkami w sprayu,
- niepalny,
- antypoślizgowy spód,
- wielokrotnego użytku.



Rozwiązania mocujące są łatwe w użyciu i nie powodują podrażnień ciała.



KOD ARTYKUŁU	OPIS	ROZMIAR w cm: DŁUG. x SZER. x WYS.
P911L1HW	P911L - Klin odwodzący	24 x 16 x 18

GWARANCJA

2
LATA



P911L - KLIN ODWODZĄCY


ZALETY PRODUKTU »

Zrobiony z piany wysokoelastycznej HR

- zaokrąglone krawędzie nie powodują podrażnień,
- wysokoelastyczna piana gwarantuje optymalny komfort w kontakcie z ciałem.

Anatomiczny kształt Klinu

- idealnie dopasowuje się do kształtu kończyn dolnych,
- umożliwia łatwe użycie.

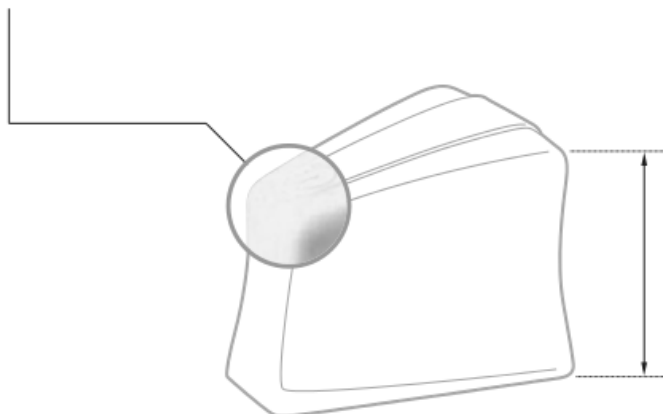


Odpowiednia wysokość klinu


- pozwala na zastosowanie podczas siedzenia przy stole



POZYCJA LEŻĄCA

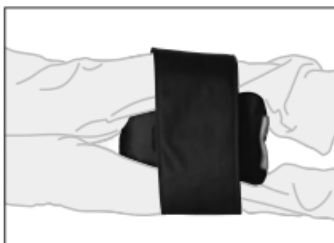

POZYCJA BOCZNA

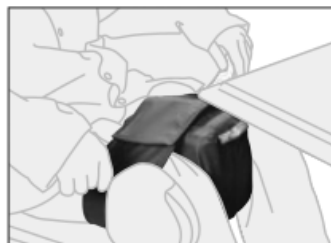

POZYCJA SIEDZĄCA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Operacje bioder są bardzo powszechne (ok 100 000 przypadków rocznie)

Po wszczepieniu endoprotezy istotne jest, aby ograniczyć ruchomość stawu biodrowego, żeby nie dopuścić do powikłań.

Ryzyko wypadnięcia endoprotezy jest bardzo prawdopodobne dlatego też zaleca się unikanie:

- krzyżowania kończyn,
- przywodzenia, odwodzenia,
- rotacji operowanej strony do wewnątrz,
- nadmiernego zginania kończyn.

Zastosowanie klinu stabilizuje kończyny dolne, utrzymuje je w odpowiedniej odległości względem siebie, zapobiega ruchom powodującym dyslokację stawu biodrowego.

Klin stabilizuje pozycję bioder co pozwala na szybszą rekonwalescencję.

Klin umieszczany jest między nogami powyżej kolan.

Można z niego korzystać zarówno w pozycji leżącej jak i siedzącej.

Aby dokonać czynności wymagających przewrócenie pacjenta na bok klin może być umieszczony między nogami poniżej kolan.

Taka pozycja klina znacznie ułatwia przewrócenie pacjenta na bok nie powodując rotacji miednicy.

