

Poduszka uniwersalna "średnia"



PODUSZKA UNIWERSALNA STANDARDOWA ŚREDNIA

- Jest to idealny produkt pozycjonujący: pomaga podeprzeć pacjenta, stanowi ochronę dla wewnętrznych bocznych obszarów kolan, kostek
- Może być wykorzystana jako poduszka pod głowę łagodząc nacisk na potylicę.
- Produkt można wykorzystywać sam lub w połączeniu z innymi artykułami.
- Dostępne są dwa rozmiary: mały i standardowy

PRODUKTY DO POZYCJONOWANIA PACJENTA

PRODUKTY DO POZYCJONOWANIA PACJENTA WYKONANE Z MIKRO-GRANULEK

MATERIAŁY



Mikro-granulki polistyrenu o małej granulometrii



Zdejmowany pokrowiec Polymaille®

Konserwacja pianki:



Konserwacja pokrowca:



PODUSZKI P9700B - UNIWERSALNA «MAŁA» I P9701B - UNIWERSALNA «STANDARDOWA»

- Jest to idealny produkt pozycjonujący: pomaga podeprzeć pacjenta, łagodzi nacisk na potylicę, stanowi ochronę dla wewnętrznych bocznych obszarów kolan, kostek, a ponadto może być wykorzystany jako poduszka.
- Produkt można wykorzystywać sam lub w połączeniu z innymi artykułami.
- Dostępne są dwa rozmiary: Mały i standardowy.



P9703B - PODUSZKA ODWODZĄCA KOLANA

- Przy jednoczesnym korzystaniu z poduszek P9702 i P9703 pozwala ułożyć pacjenta w wygodnej pozycji pół fowlera (plecy i miednica pod kątem 30°), a także w pozycji grzbietowej dzięki pewnemu przytrzymywaniu miednicy i obszarów odwodzonych z wykorzystaniem półokrągłej poduszki odwodzącej P9703.
- Zmniejsza nacisk na wewnętrzną część kostki oraz na wewnętrzne części kolan.



P9702B - PODUSZKA WAŁEK

- Produkt może być wykorzystywany na różne sposoby, np. podkładany pod kolana, by podtrzymać dolne kończyny w pozycji pół fowlera.
- W przypadku łącznego stosowania z poduszką odwodzącą (P9703), umożliwia pewne przytrzymanie odwodzonych kończyn na miejscu, a także chroni wewnętrzne części kolan.



Kod artykułu	Opis	Rozmiary w cm (dł. x szer.)	Rozmiary w calach (dł. x szer.)
P9700BIHW	P9700B - Poduszka uniwersalna «mała»	35 x 26	13,6 x 10
P9701BIHW	P9701B - Poduszka uniwersalna «standardowa»	56 x 40	22 x 15
P9702BIHW	P9702B - Poduszka wałek	Ø 20 x 60	Ø 7 x 23
P9703BIHW	P9703B - Poduszka odwodząca kolana	62 x 32	24 x 12,4
P9704BIHW	P9704B - Poduszka pierścieniowa pod kark	50 x 50	19 x 19
P9705BIHW	P9705B - Poduszka „półksiężyc”	135 x 85	52,5 x 33
P9706BIHW	P9706B - Opcjonalna poduszka pod plecy, używana wraz z poduszką półksiężycową	58 x 40	22,5 x 15
P9707BIHW	P9707B - Poduszka wąz – boczna pozycja	180 x 54	70,8 x 21,6
P9708BIHW	P9708B - Poduszka półksiężycowa wraz z poduszką pod plecy	135 x 85 40 x 58	51,3 x 32,3 15,2 x 22
PKDEMOSAC01	Torba do przenoszenia		
PKDEMOPOS01	Kompletny zestaw wraz z torbą do przenoszenia		

GWARANCJA 2 LATA

PRODUKTY PRZEDNACZONE DO

1

PRODUKTY DO POZYCJONOWANIA PACJENTA WYKONANE Z MIKRO-GRANULEK

P9704B - PODUSZKA POD KARK

- Stanowi wygodne podparcie dla głowy zarówno w pozycji siedzącej, jak i półleżącej.
- Łatwa w użyciu, samomocujący pasek.



P9708B

P9705B - PODUSZKA „PÓŁKSIĘŻYC”

P9706B - OPCJONALNA PODUSZKA POD GŁOWĘ, UŻYWANA WRAZ Z PODUSZKĄ „PÓŁKSIĘŻYC”

- Pewnie podtrzymuje miednicę oraz górną część ciała w miejscu, gdy pacjent spoczywa w pozycji pół fowlera lub grzbietowej. Łagodzi nacisk na łokcie. Wyposażona w pasek zapewniający dodatkowe podtrzymanie P9706, pozwalający utrzymać głowę w jednym położeniu.
- Możliwość zastosowania na wózku inwalidzkim.
- Wyłącznie w SYSTAM®: wyposażona w system EasyShape®, który pozwala na zachowanie pozycji dostosowanej do morfologii pacjenta.



P9707B – PODUSZKA „WĄŻ” DO BOCZNEGO POZYCJONOWANIA PACJENTA

- Zaprojektowana wraz z wewnętrzną poduszką zapewniającą optymalny komfort.
- Zapewnia wygodne ułożenie kolan, miednicy oraz górnej części ciała podczas leżenia na boku.
- Wyłącznie w SYSTAM®: wyposażona w system EasyShape®, który pozwala na zachowanie pozycji dostosowanej do morfologii pacjenta.
- Dostępna w jednym rozmiarze, odpowiednia dla pacjentów o różnych wymiarach.



PRODUKTY DO POZYCJONOWANIA PACJENTA

PRODUKTY DO POZYCJONOWANIA PACJENTA WYKONANE Z MIKRO-GRANULEK

«ZALETY» PRODUKTU

PRODUKTY DO POZYCJONOWANIA PACJENTA SYSTEM® Z MIKRO-GRANULKAMI


MIKRO-GRANULKI POLISTYRENU

- Materiał o niezwyklej lekkości: mikro-granulki polistyrenu ekspandowanego o małej granulometrii zapewniają dodatkowy komfort oraz dostosowywanie się podparcia do morfologii pacjenta.
- Produkt niepalny.



ZAPIĘCIE NA RZEPY

- Proste i efektywne.

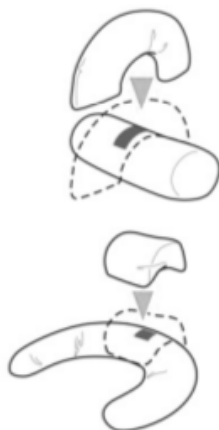

PRODUKTY DOSTARCZANE WRAZ Z DWOMA POKROWCAMI, Z KTÓRYCH JEDEN JEST ZDEJMOWANY

- Łatwość prania
- Lepsza higiena
- Dłuższy okres przydatności poduszki
- Do użycia przez wielu pacjentów.



TORBA DO PRZENOSZENIA

- wraz z miejscem na dokumenty o formacie A4.



OKRYCIE POLYMAILLE®:

ODDYCHAJĄCE I WODOODPORNE

- Okrycie antyalergiczne Polyurethane® na materiale poliestrowym nasączonym środkiem przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym i grzybobójczym.
- POLYMAILLE® rozciąga się w dwóch kierunkach, dzięki czemu pozwala ograniczyć wpływ nacisku i tarcia.
- POLYMAILLE® zapewnia wysoką oddychalność i w znacznym stopniu redukuje macerację.
- POLYMAILLE® jest również całkowicie wodoodporny, dzięki czemu możliwa jest lepsza kontrola higieny.
- Można prać w temp. 95° i dezynfekować środkami w sprayu.
- Produkt niepalny.

PRODUKTY PRZEZUCIOWE




PRODUKTY DO POZYCJONOWANIA PACJENTA WYKONANE Z MIKRO-GRANULEK

«ZALETY» PRODUKTU

Charakterystyka poduszek ułożeniowych


EASYSHAPE®
SYSTEM

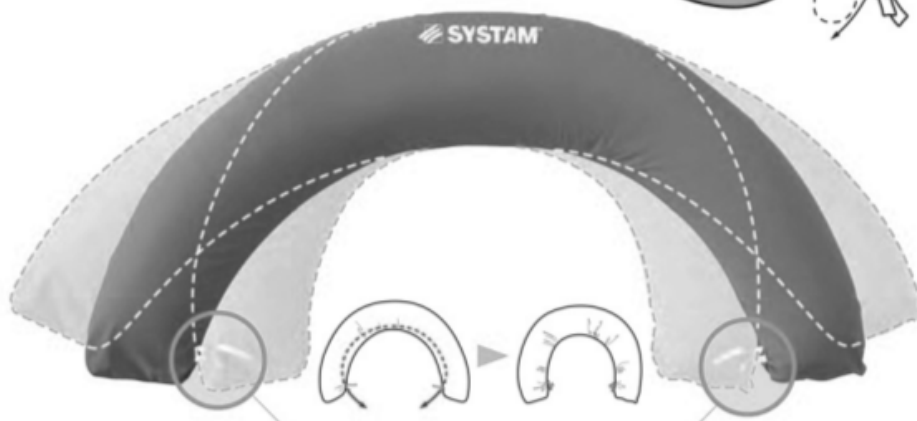

EASYSHAPE® :

SYSTEM DOSTOSOWUJĄCY, DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W SYSTEM®

- Paski przymocowane do okrycia poduszki półkolistej (P9705) oraz do okrycia poduszki do bocznej pozycjonowania pacjenta (P9707) zapewniają łatwy sposób dopasowania i utrzymania produktu w położeniu dostosowanym do morfologii pacjenta, podnosząc tym samym komfort pacjenta oraz zwiększając ergonomię podparcia.
- Pociągnięcie za paski sprawia, że zakrzywienie produktu zwiększa się, uzyskany kształt można następnie zachować poprzez związanie pasków.

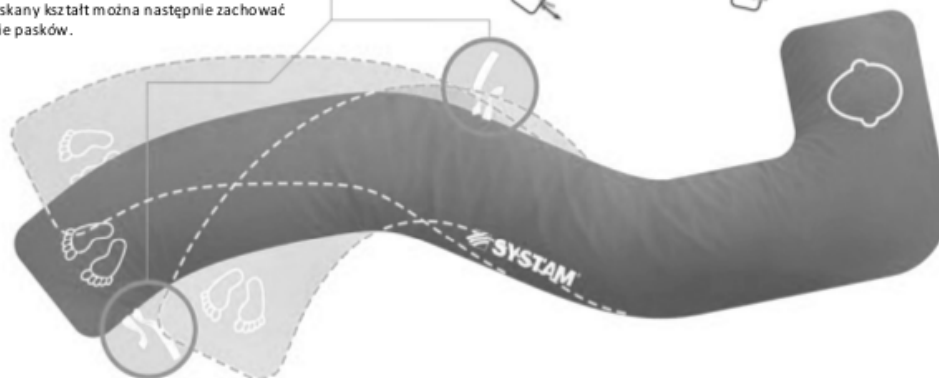

- Prosty i łatwy w użyciu system EasyShape® pozwala na lepsze dostosowanie produktu do morfologii pacjenta, a także zapewnia zachowanie uzyskanej pozycji przez dłuższy czas.

