

Materac przeciwoleżynowy Viscoflex Air - z wkładką pneumatyczną



Materac przeciwoleżynowy Viscoflex Air - z wkładką pneumatyczną 90x200x14 cm

Niniejszy materac jednosekcyjny oferuje połączone zalety wysokoelastycznej pianki o bardzo dużej gęstości (80kg/m³) oraz jednego wkładu pneumatycznego Polyair (51 x 43 cm) i jednego wkładu typu Viscoflex z efektem pamięci.

Istnieje możliwość dokupienia wkładu typu Viscoflex lub poduszki pneumatycznej aby zamienić którąś z sekcji (zgodnie z koncepcją Evolutive) w zależności od stanu skóry pacjenta.

Dostarczany z pokrowcem Polymaille i manometrem.

Materac przeznaczony jest do profilaktyki i leczenia odleżyn do IV stopnia według skali EPUAP.

Materac jest dostarczany w poliuretanowym, nieprzemakalnym pokrowcu Polymaille. Materac całkowicie zastępuje tradycyjne materace zmienno-ciśnieniowe przeznaczone do leczenia i profilaktyki odleżyn stopnia I-IV. Jest to szczególnie ważne dla pacjentów, u których ze względu na stan zdrowia lub dyskomfort związany z wibracjami, stosowanie materacy zmienno-ciśnieniowych nie jest zalecane lub jest wręcz niemożliwe.

NASZE MATERACE

SYST'AM® P161MOR VISCOFLEX® Evolutive/Air/Air+Air

FORMOWANY MATERAC JEDNOSEKOWY, WYKONANY Z WISKOELASTYCZNEJ PIANKI Z EFEKTEM PAMIĘCI, WYPOSAŻONY W STELAŻ Z PIANKI HR I PODUSZKI POLYAIR®

MATERIAŁY

80 kg/m³



Pianka z pamięcią

40 kg/m³



Pianka HR wysokoelastyczna



Laxpren



POLYMAILLE® - pokrowiec wielokrotnego użytku



Konserwacja pianki:



Konserwacja pokrowca POLYMAILLE®:



PRZEZNACZENIE

Ryzyko

NISKIE

BARDOZO WYSOKIE

Materac VISCOFLEX® Air powinien być stosowany w przypadku:

- 1 - Potrzeby długoterminowej opieki w łóżku będącej skutkiem choroby lub niepełnosprawności oraz jednoczesnego zwiększonego ryzyka powstania odleżyn, zgodnie ze skalami oceny (Braden, Norton, Waterlow, ...); LUB
- 2 - Powstania odleżyn (od 1. do 4. stopnia według EPUAP).



POLYMAILLE® - ZINTEGROWANY POKROWIEC WIELOKROTNIEGO UŻYTKU
Hypoalergiczna, poliuretanowa powłoka (przeciwbakteryjna, antygrzybiczna).
POLYMAILLE® jest bardzo rozciągliwy, redukuje tarcie.
Trzystronny zamek błyskawiczny i antypoślizgowa podstawa.



SYST'AM®
VISCOFLEX® AIR+AIR



SYST'AM® VISCOFLEX® AIR
WRAZ Z PODUSZKĄ POLYAIR®
UMIESZCZONĄ W OBSZARZE
POD STOPAMI

14 cm



SYST'AM®
VISCOFLEX® EVOLUTIVE



SPOSÓB DZIAŁANIA KONCEPCJI RÓŻNICOWANEJ GĘSTOŚCI

- Powierzchnia o zróżnicowanej gęstości pozwala na lepszy rozkład nacisku dzięki przenoszeniu go z obszarów o niższej gęstości w kierunku obszarów o wyższej gęstości:

BIAŁE OBSZARY:

Obszary o niższej gęstości (miękką piankę) gwarantujące lepsze zapobieganie odleżynom w miejscach ciała nimi zagrożonych (kość krzyżowa, pięty, łopatki).

NIEBIESKIE OBSZARY:

Obszary o wysokiej gęstości (twardszą piankę) przeznaczone dla części ciała, które w mniejszym stopniu są zagrożone odleżynami.

Kod artykułu	Opis	Wymiary (szer. x dł.) (cm / cal)	Waga pacjenta (kg / funty) Min.	Max.
P161MOEPMHI	P161MOE - Viscoflex® Evolutive z 2 zdejmowanymi sekcjami z pianki z efektem pamięci. Dostarczany z pokrowcem wielokrotnego użytku Polymaille	90 x 200 / 35 x 78	35 / 77	130 / 286
P161MORPMHI	P161MOR - materac Viscoflex® Air - wraz z 1 sekcją z pianki z efektem pamięci oraz 1 sekcją z elementem Polyair®. Dostarczany z pokrowcem wielokrotnego użytku Polymaille i wskaźnikiem ciśnienia	90 x 200 / 35 x 78	35 / 77	130 / 286
P161MO2RPMHI	P161MOR - materac Viscoflex® Air+Air - wraz z 2 elementami Polyair. Dostarczany z pokrowcem wielokrotnego użytku Polymaille i wskaźnikiem ciśnienia	90 x 200 / 35 x 78	35 / 77	130 / 286
P301CR51432HW	Element Polyair®		"	"
P161MO2	Element Viscoflex® z miękkiej pianki z efektem pamięci		"	"

Wszystkie materace są dostarczane sprasowane. Jeśli mają zostać dostarczone NIE SPRASOWANE, za nr artykułu należy dodać NC.

GWARANCJA

2 LATA

PRODUKTY PRZEZNACZONE DLA SENIORÓW

SYST'AM® P161MOR / VISCOFLEX® EVOLUTIVE / AIR / AIR + AIR

«ZALETY» PRODUKTU

FORMOWANY WISKOELASTYCZNY MATERIAŁ Z EFEKTEM PAMIĘCI

- Dokładne odwzorowanie ciała oraz styczność materaca z większą powierzchnią ciała pacjenta;
- Zwiększona powierzchnia kontaktu z ciałem zmniejsza nacisk w miejscach szczególnie narażonych na powstanie odleżyn;
- Podniesiony komfort i stabilność pacjenta;
- Efekt skórki uzyskany dzięki procesowi formowania: ochrona pianki przed niszczącymi czynnikami (rozdarciami, kruszeniem);
- Zabezpiecza materac przed odkształceniem i deformacją.



FORMOWANY MATERAC JEDNOSEKCYJNY

- Gwarantuje zachowanie idealnego stanu materaca.
- Pasuje do łóżek standardowych i wielosekcyjnych.
- Oszczędność czasu oraz łatwiejsza instalacja barier.

MODUŁ POLYAIR® (patrz str. 62)



INNOWACJA SYST'AM®: STELAŻ O ANATOMICZNYM Kształcie WYKONANY Z PIANKI HR

- Anatomiczny kształt umożliwia lepsze zagłębienie w materacu okolic kości krzyżowej, dzięki czemu uzyskiwany jest większy kontakt ciała z powierzchnią materaca i redukcja maksymalnych wartości nacisku;
- Zwiększona ochrona okolic kości krzyżowej przed powstawaniem odleżyn.

ZWYKŁY MATERAC Z PIANKI Z EFEKTEM PAMIĘCI

- W miejscu zagrożonym odleżyną pianka z efektem pamięci jest silnie ugnieciona, w szczególności w pozycji półfowlera.



Pacjent w pozycji leżącej



Pacjent w pozycji półfowlera

VISCOFLEX® Z FORMOWANYM STELAŻEM ANATOMICZNYM

- Stełaż anatomiczny odzwierciedla kształt ciała pacjenta w obszarze kości krzyżowej, a maksymalna grubość pianki z efektem pamięci w każdym przypadku sprzyja lepszej ochronie tego zagrożonego obszaru.



Pacjent w pozycji leżącej



Pacjent w pozycji półfowlera

ZAOKRĄGLONE KRAWĘDZIE

- Łatwiejsza instalacja barier.

KONCEPCJA EVOLUTIVE (patrz str. 62)

KONCEPCJA STELAŻA ANATOMICZNEGO, WYKONANEGO Z WYSOCE WYTRZYMAŁEJ PIANKI

- Materiał uzyskiwany poprzez formowanie, składający się z kilku idealnie przylegających do siebie warstw, których spójenie z czasem nie ulega osłabieniu:
 - Nie ulega rozdzielaniu;
 - Nie wymaga klejów, ani rozpuszczalników;
 - Idealne przywieranie 2 pianek
- Wykonany z wysoce wytrzymałej pianki (HR) o dużej gęstości (40kg/m³), zapobiegającej efektowi zapadania.



MATERACE VISCOFLEX® EVOLUTIVE / AIR / AIR+AIR SĄ DOSTARCZANE SPRASOWANE I ZROLOWANE

- Więcej miejsca: materac ma 2,5 razy mniejszą objętość.

NASZE MATERACE

SYST'AM® - P161MOR VISCOFLEX® EVOLUTIVE / AIR / AIR+AIR


«ZALETY» PRODUKTU

KONCEPCJA EVOLUTIVE


- System modułowy, łatwy do zastosowania dzięki elementom POLYAIR®, które mogą być umieszczane w okolicach pośladków lub pięt, zależnie od stanu skóry pacjenta.
- 2 moduły, dostępne oddzielnie, umożliwiając:
 - Dodanie drugiego elementu POLYAIR®;
 - Przekształcenie VISCOFLEX® Air w VISCOFLEX® Evolutiv;
 - Przekształcenie VISCOFLEX® Evolutiv w VISCOFLEX® Air;




ELEMENT POLYAIR®

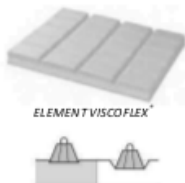

ELEMENT VISCOFLEX®

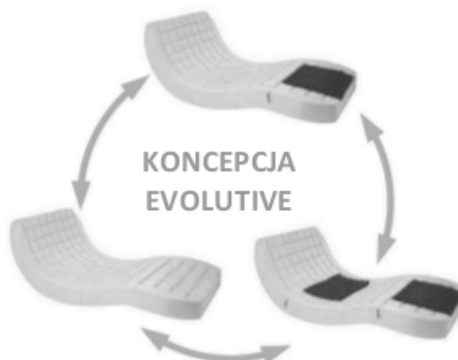

KONCEPCJA EVOLUTIVE

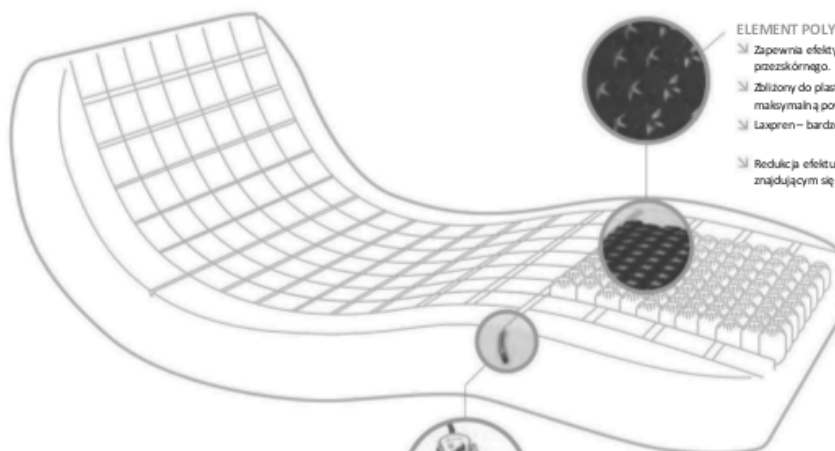

ELEMENT POLYAIR®

- ✓ Zapewnia efektywną i zlokalizowaną redukcję nacisku przekrośowego.
- ✓ Zbliżony do płaszcza międy kształt bloków zapewnia maksymalną powierzchnię przylegania.
- ✓ Laxpren – bardzo elastyczny i odporny na rozdarcia.
- ✓ Redukcja efektu maceracji dzięki kanałom wentylacyjnym znajdującym się między blokami.

MANOMETR ZAPEWNIĄCY PRECYZYJNE I EFEKTYWNE NAPEŁNIANIE POWIETRZEM

- ✓ Materac dostarczany jest wraz z manometrem zapewniającym łatwe, efektywne i powtarzalne napełnienie powietrzem elementu POLYAIR®.
- ✓ Naplnienie powietrzem elementu POLYAIR® jest możliwe bez konieczności zdejmowania pokrywy dzięki odpowiednio zaprojektowanemu systemowi dostępu do zaworów, który gwarantuje szczelne zamknięcie i ochronę materaca.



WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ DZIĘKI ELEMENTOM POLYAIR®

MATERAC VISCOFLEX®



Kość krzyżowa

Pięty


MATERAC VISCOFLEX® AIR+AIR



Kość krzyżowa

Pięty

NAKLADKA VISCOFLEX® AIR (3 sekcje)

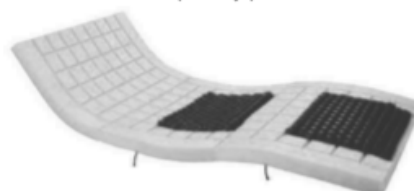

NAKLADKA VISCOFLEX® AIR
Z KONCEPCJĄ EVOLUTIVE



MATERACE SYSTEM		WSKAZANIA	RYZIKO ODLEŻYŃ
NASZE MATERACE POWINNY BYĆ UŻYWANE, GDY:			
P101M POLYLOT		1. Istnieje potrzeba długotrwałego przebywania w pozycji leżącej przy jednocześnie występującym zagrożeniu odleżynami według skali (Bradena, Norton, Waterlowa). Odleżyny 1 i 2 stopnia według EPUAP.	
P181M POLYMULTI VISO			
P161M-S VISCOFLEX® OVERLAY		1. Istnieje potrzeba długotrwałego przebywania w pozycji leżącej przy jednocześnie występującym zagrożeniu odleżynami według skali (Bradena, Norton, Waterlowa). Odleżyny 1 i 2 stopnia według EPUAP.	
P171M POLYSTRAT HE			
P171M-V POLYSTRAT HE-V		1. Istnieje potrzeba długotrwałego przebywania w pozycji leżącej przy jednocześnie występującym zagrożeniu odleżynami według skali (Bradena, Norton, Waterlowa). Odleżyny 1 do 3 stopnia według EPUAP.	
P161M VISCOFLEX®			
P161M VISCOFLEX® z multipowierzchnią		1. Istnieje potrzeba długotrwałego przebywania w pozycji leżącej przy jednocześnie występującym zagrożeniu odleżynami według skali (Bradena, Norton, Waterlowa). Odleżyny 1 do 3 stopnia według EPUAP oraz do 4 stopnia z użyciem pozycjonerów.	
P161M-OE VISCOFLEX® EVOLUTIVE			
P161M-lub VISCOFLEX® AIR		1. Istnieje potrzeba długotrwałego przebywania w pozycji leżącej przy jednocześnie występującym zagrożeniu odleżynami według skali (Bradena, Norton, Waterlowa). Odleżyny 1 do 4 stopnia według EPUAP.	
P161M-O2R VISCOFLEX® AIR + AIR			
VISCOFLEX® Evolutive umożliwia modyfikację konfiguracji materaca na VISCOFLEX® Air oraz VISCOFLEX® Air+Air w zależności od potrzeby pacjenta			

Każdy oferowany przez nas materac firmy System ze względu na swoją unikalną technologię produkcji posiada nieregularne otwory technologiczne oraz pęcherzyki powietrzne widoczne na spodzie materaca . Jest to naturalny efekt procesu produkcyjnego i nie ma żadnego wpływu na jakość oraz walory użytkowe materaca.

