

Wózek inwalidzki stalowy FS 901



Solidnie wykonany wózek inwalidzki FS 901

Doskonała alternatywa dla innych tego typu urządzeń. Charakteryzuje się niską ceną i wysokiej jakości wykonaniem. Idealnie sprawdzi się dla każdego pacjenta niepełnosprawnego lub o obniżonej sprawności ruchowej. Estetyka i staranność wykonania oraz łatwość w składaniu to jego niewątpliwe atuty. Stalowe elementy – rama na podwójnym krzyżaku zapewnia stabilność użytkowania. Łamane oparcie i dodatkowe uchwyty, które ułatwiają składanie sprawiają, że po złożeniu jest to sprzęt kompaktowy, który nie zajmuje dużo miejsca. Idealny do małych pomieszczeń. Wózek wyposażony jest również w wygodne siedzisko oraz miękkie podłokietniki zapewniające komfort pacjenta.



gwarancja



Składany



Wyrób medyczny



Certyfikat CE



Łatwy w czyszczeniu

Dane techniczne:

- wykonany na stalowej ramie, posiada łamane oparcie, podwójny krzyżak i ciągi z

wytrzymałego tworzywa podnoszące komfort użytkowania

- wyposażony w hamulce dla osoby prowadzącej
- posiada wygodne, głębokie siedzisko o wymiarach 43cmx46cm
- przednie koła mają średnicę 6" , tylne mają średnicę 20" i są pompowane
- wyposażony jest w uchwyty ułatwiające składanie wózka
- maksymalne obciążenie wózka to 100 kg

KOMFORT DLA PACJENTA - Wózek wyposażony jest w uchylnie podnóżki z funkcją 3-stopniowej regulacji kąta odchylania, krótkie podłokietniki oraz uchwyty ułatwiające składanie.


PROSTOTA - Wózek stalowy standard-TIM szybko się składa i rozkłada bez użycia nadmiernej siły. Wózek po złożeniu waży maksymalnie 16,4 kg.

TRWAŁOŚĆ NA LATA - Stalowa rama posłuży długie lata i utrzyma ciężar nawet do 100 kilogramów.

UNIWERSALNOŚĆ - Wózek o stalowej ramie wyposażony jest w tylne pompowane koła, dzięki czemu amortyzowane są nierówności na drodze dzięki czemu można z niego korzystać wszędzie, bez ograniczeń.

Wyposażenie:

- taśma zabezpieczająca łydki
- pompka
- zestaw kluczy

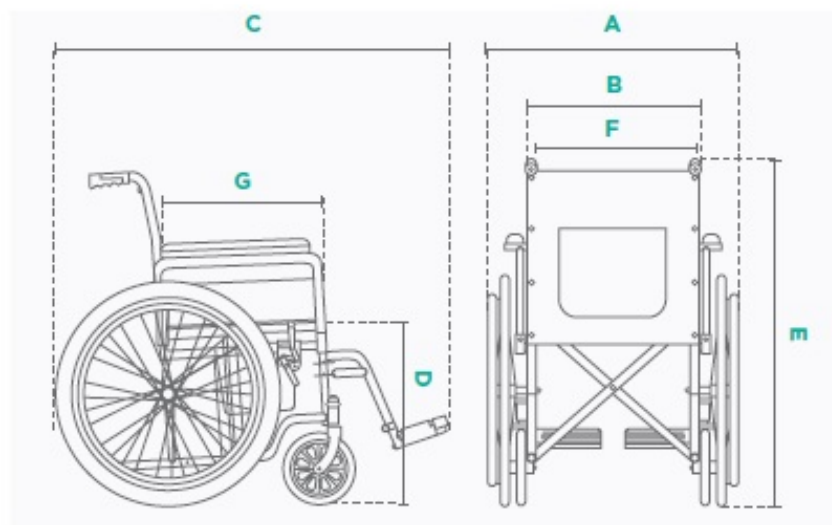

A Szerokość całkowita: 60-63 cm
B Szerokość wewnętrzna: 43, 46 cm
C Głębokość całkowita: 96 cm
D Wysokość siedziska od podłoża: 49 cm
E Wysokość całkowita: 92 cm
F x G Wymiary siedziska: 42, 45 cm x 39 cm
Waga: 16,4 kg
Maksymalne obciążenie: 100 kg
Szerokość po złożeniu: 32 cm
Kolory ramy: czarny
+/- 0,5 -1 cm

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Wózek inwalidzki przeznaczony jest do transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo-mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych.

Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym.

PRZECIWWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej. Stany wymagające stabilizacji górnego odcinka kręgosłupa oraz głowy. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi nie powinni pozostawać w wózku bez opieki.