


Raizer II - urządzenie do bezpiecznego podnoszenia pacjenta po upadku



Raizer II marki Liftup urządzenie do bezpiecznego podnoszenia pacjenta po upadku

Akumulatorowe mobilne krzesło podnoszące pomaga osobie po upadku w ciągu kilku minut powrócić do pozycji prawie stojącej. Urządzenie może być obsługiwane tylko przez jednego pomocnika i wymaga jedynie niewielkiego wysiłku fizycznego operatora.

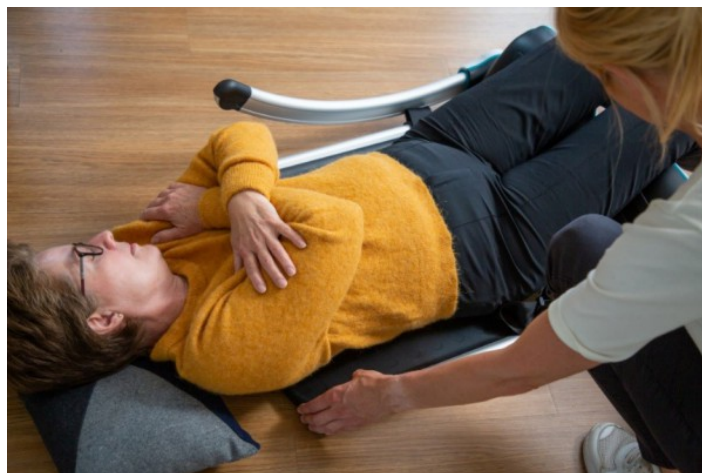


Raizer II może być używany w opiece domowej, w instytucjach, w służbach ratowniczych i innych służbach wymagających podnoszenia i przenoszenia osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Osoba po upadku, która nie może ponownie wstać, jest podnoszona wygodnie do pozycji siedzącej lub prawie stojącej w sposób, który wspiera całe ciało podczas procesu pionizacji. Gwarantuje to otrzymywanie pomocy w komfortowy i bezpieczny sposób.

Raizer II

- Mobilna pomoc do podnoszenia osoby po upadku
- Wygodna i bezpieczna dla użytkownika i asystenta
- Podnosi do 150 kg
- Łatwy montaż w kilka minut
- 2 identyczne oparcia i 4 identyczne nogi ułatwiają montaż
- Brak ryzyka przeciążenia dla opiekuna
- Osoba po upadku i opiekun mogą czuć się bezpiecznie
- Ulepszona możliwość czyszczenia: można dezynfekować

- Wskaźnik baterii na panelu sterowania
- Intuicyjny wskaźnik dźwiękowy i świetlny zapewniający płynny montaż
- Łatwy transport w dwóch torbach
- Alarm na panelu sterowania w celu przeprowadzenia przeglądu serwisowego
- Pojemność baterii: ok. 80 wind na jednym ładowaniu
- Wymiary siedziska: szer .: 68,6 cm / gł .: 25,7 cm / wys .: 19 cm

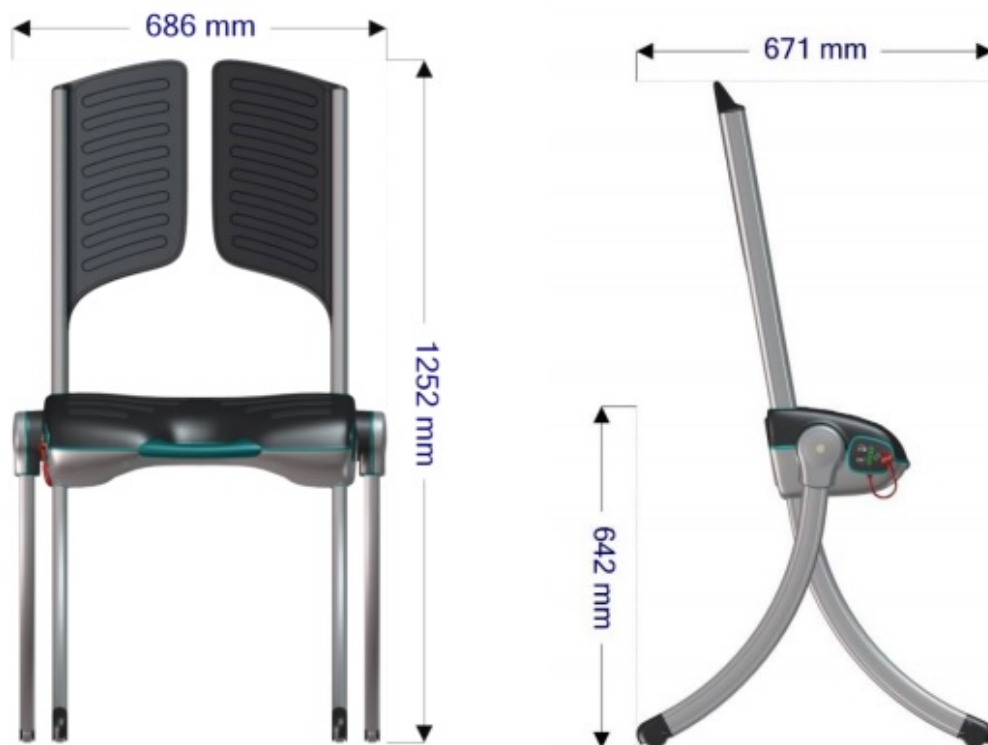

Nowe korzyści ergonomiczne

Raizer II można łatwo zmontować pod osobą po upadku, a proces podnoszenia jest szybko inicjowany przez naciśnięcie przycisku na pilocie lub panelu sterowania z boku fotela. Oznacza to, że asystent nie musi wykonywać podnoszenia i nie jest narażony na obciążenie pleców ani ramion, co może się zdarzyć w przypadku innych urządzeń. Pomocnik może samodzielnie (w pojedynkę) obsługiwać Raizer II i pomagać osobie po upadku.

Komfortowe podnoszenie

Wszystkie materiały zostały starannie dobrane ze szczególnym uwzględnieniem stabilności i trwałości, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom.

Raizer II wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa, które należy przypiąć do obu oparć, aby osoba po upadku czuła się bezpiecznie i komfortowo podczas podnoszenia. Istnieje możliwość przypięcia dodatkowych pasów bezpieczeństwa na oparciach Raizer II. W ten

sposób tułów osoby po upadku można zabezpieczyć w kilku pozycjach dla zwiększenia komfortu.



Nowoczesny i praktyczny projekt

Raizer II oferuje przyjazną dla użytkownika konstrukcję z intuicyjnymi wskaźnikami dźwiękowymi i świetlnymi, co ułatwia szybki montaż Raizer II w dowolnym miejscu. Dwa oparcia są do siebie podobne, a cztery identyczne nogi można szybko zamontować w dowolnej kolejności, co jest szczególnie ważne w sytuacji wymagającej szybkiej reakcji.

Wszystkie powierzchnie Raizer II zostały opracowane tak, aby były łatwe do czyszczenia pod względem doboru materiałów i struktury powierzchni, a powierzchnie Raizer II mogą być również dezynfekowane.

Rozwiązanie mobilne

Podnośnik jest zasilany z akumulatora i dlatego nie musi być podłączony do gniazdka elektrycznego. Raizer II można łatwo obsługiwać za pomocą pilota, który jest trzymany z boku fotela, gdy nie jest używany. Raizer II wyda ostrzeżenie, jeśli pilot nie zostanie umieszczony na swoim miejscu po użyciu.

Łatwy w transporcie

Po rozmontowaniu Raizer II jest przechowywany w dwóch torbach i może zostać łatwo przeniesiony na kolejne miejsce użycia. Oparcia i nogi przenoszone są w torbie z ergonomicznymi paskami do przenoszenia na ramieniu lub na plecach (długi pasek na ramiona lub dwa jako plecak). Jednostka silnikowa / siedzenie jest przenoszone

oddzielnie w pokrowcu ochronnym z miękkim uchwytem, ergonomicznie zaprojektowanym, aby zapewnić, że jest noszony blisko ciała. Alternatywnie Raizer II można transportować na wózku (wyposażenie opcjonalne), na którym można umieścić obie torby obok siebie. W ofercie zestaw uchwytów rowerowych (wyposażenie opcjonalne) do zamontowania wózka za rowerem.



Dane techniczne:

- Akumulator: LiFePo4, 12V, 5AH
- Liczba wyciągów na pełnym naładowaniu: 40 z max. obciążeniem. Około 80 przy średnim obciążeniu
- Cykl pracy: 1 min. / 5 minut.
- Czas ładowania: do 6 godzin za pomocą dostarczonej ładowarki
- Ładowanie rozładowanego akumulatora: 10-15 min = 1 winda
- Wymiary (dł. X szer. X wys.):
 - Pozycja stojąca 671 x 686 x 1252 mm
 - Leżący 1319 x 686 x 321 mm
- Waga: Jednostka napędowa / siedzisko 8,5 kg - Oparcie i nogi 4,5 kg = łącznie 13 kg
- Udźwig: Max. 150 kg
- Czas podnoszenia: 20-30 sek.

- Poziom hałasu: <70 dB A
- Pył i woda IP 52 (ochrona przed ograniczonym wnikiem pyłu; ochrona przed sprej wodny)
- Temperatura pracy: od + 5°C do + 40°C
- Temperatura przechowywania: od -25°C do + 70°C
- Materiały: Jednostka silnikowa / siedzenie: poliwęglan + ABS
 - Oparcia: ABS
 - Nogi: aluminium